


# Score d'alerte précoce

Calcul automatique intégré



Calcul ponctuel avec date et heure

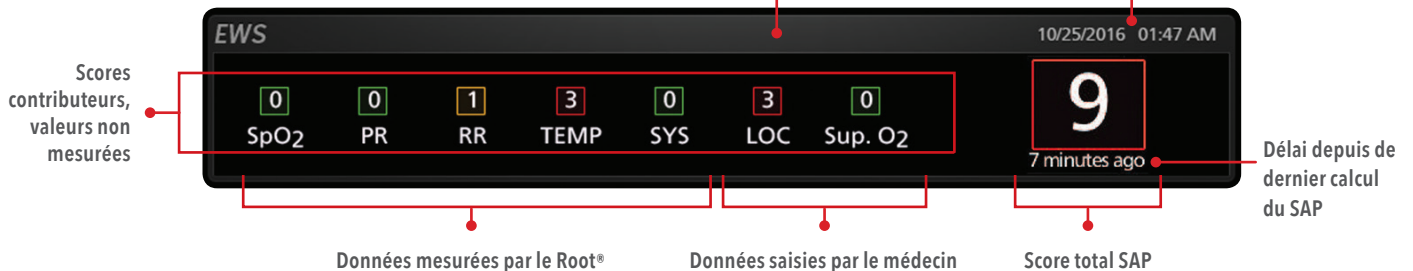

- > Le calcul automatique du score d'alerte précoce (SAP) est lancé par le médecin
- > Les scores contributeurs sont issus des valeurs mesurées et des données saisies par le médecin, puis ils sont additionnés pour obtenir le score global SAP
- > Le dispositif Root est doté d'un écran haute visibilité avec une navigation tactile intuitive pour une lecture rapide des mesures, une utilisation simple et flexible, quel que soit l'environnement hospitalier

# Solutions de connectivité avancées avec Patient SafetyNet™\* ou Iris Gateway™

## Association au chevet du patient



Interfaçage au chevet du patient avec le système HL7 d'admission, de sortie et de transfert de l'hôpital pour l'association du patient, de l'appareil et du médecin

## Transmission électronique automatisée



Root récupère les données du patient et le SAP



Patient SafetyNet ou Iris Gateway convertit les données au format HL7



Patient SafetyNet ou Iris Gateway automatise le transfert des données vers le DPI

## Transmission électronique manuelle au chevet du patient



Afin de simplifier la transmission de données patient, le médecin peut vérifier et entrer certaines informations sur le Root, comme le niveau de conscience, le niveau de douleur et le débit urinaire puis les transmettre au DPI

\* La marque déposée Patient SafetyNet est utilisée sous licence du consortium universitaire des systèmes de santé (University Health System Consortium).

Pour un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

